


ACP-Long

Vástago Femoral Cementado de Revisión

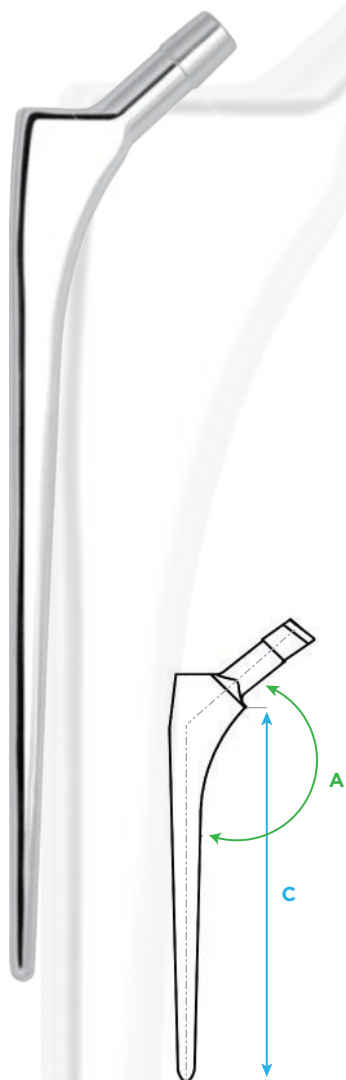

CARACTERÍSTICAS

La filosofía de diseño de doble cono proporciona fuerzas de compresión naturales para asegurar que el implante se encuentre asentado firmemente colocado dentro del manto de la capa de cemento.

Superficie pulida diseñada para trabajar en conjunto con la geometría cónica mejorando la estabilidad del vástago.

La simplicidad de la técnica quirúrgica, permite utilizarlo en deficiencias y deformidades femorales que de otra manera requieren de un enfoque transtrocanterico y colocar un tallo recto no cementado para corregir la deformidad.

Minimiza el riesgo de fracturas peri-protésicas debido a que no es necesario impactarlo.

Elimina la necesidad de fresar el hueso para adaptarlo a un tallo específico.

ACP-Long Vástago Femoral Cementado de Revisión

DESCRIPCIÓN	REF	CÓDIGO	LONGITUD DEL VÁSTAGO (C) (mm)	ANGULACIÓN DEL CUELLO (A)
ACP Long Vástago Femoral Cementado de Revisión English: ACP Long Cemented Femoral Stem Material: CoCrMo Superficie: Altamente Pulida Cono: 12/14	14#(XS)	1100-1014	150	132°
	15#(S)	1100-1015	160	
	4#(M)	1100-1004	170	
	5#(L)	1100-1005	200	
	10#	1100-1010	225	
	13#	1100-1013	245	