

# TLIF Cage

CAJA DE FUSIÓN  
INTERSOMÁTICA  
LUMBAR

**OVERFIX<sup>®</sup>**  
— SPINE —

**bioadvance**  
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —



## Caja de Fusión Intersomática Lumbar

Las cajas intersomáticas constituyen implantes de gran utilidad entre las diversas opciones quirúrgicas lumbares por sus buenos resultados médicos, por eliminar la necesidad de auto-injertos y por su excelente compatibilidad con la Resonancia Magnética Nuclear.

### CARACTERÍSTICAS

#### DIENTES PIRAMIDALES

Aportan resistencia ante el desplazamiento

#### PUNTA AUTODISTRACTORA

Facilita la inserción

#### GUÍAS EN LA SUPERFICIE

Permiten ubicar y hacer girar el cage hasta la posición deseada

#### VENTANA AXIAL

Admite autoinjerto óseo o sustituto para hacer posible la fusión vertebral a través del cage

#### BIOCOMPATIBILIDAD

Excelente osteointegración




#### CILINDRO DE CONEXIÓN

Permite un mecanismo de giro en combinación con el aplicador

#### MARCADORES RADIOOPACOS


Permiten la visualización radiológica de la posición del implante

Los pins de Ø 1.4 mm están situados a unos 2.0 mm del borde anterior del implante

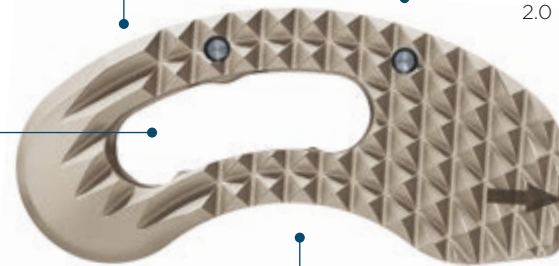

#### MATERIAL DEL IMPLANTE

Disponible en **PEEK** con marcadores radiopacos en aleación de tantalio

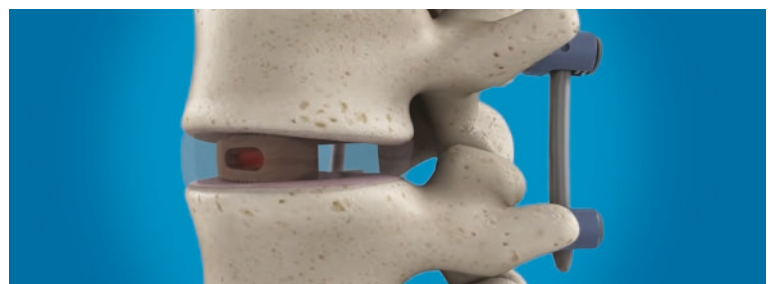

## Caja de Fusión Intersomática Lumbar


### INDICACIONES

- Enfermedades degenerativas del disco
- Inestabilidades espinales
- Revisión del síndrome post-discectomía
- Pseudoartrosis o espondilodesis fallida
- Espondilolistesis degenerativa
- Espondilolistesis ístmica

### CONTRAINDICACIONES

- Fracturas del cuerpo vertebral
- Tumores espinales
- Inestabilidades espinales mayores
- Deformidades espinales primarias
- Osteoporosis

### OVERFIX TLIF CAGE

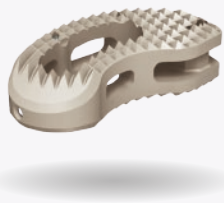



CÓDIGO	MEDIDA	MATERIAL
507041140	7x10x28	PEEK
507042140	8x10x28	PEEK
507043140	9x10x28	PEEK
507044140	10x10x28	PEEK
507045140	11x10x28	PEEK
507046140	12x10x28	PEEK
507047140	13x10x28	PEEK
507049140	15x10x28	PEEK
507051140	17x10x28	PEEK
507041250	7x12x31	PEEK
507042250	8x12x31	PEEK
507043250	9x12x31	PEEK
507044250	10x12x31	PEEK
507045250	11x12x31	PEEK
507046250	12x12x31	PEEK
507047250	13x12x31	PEEK
507049250	15x12x31	PEEK
507051250	17x12x31	PEEK



# TLIF Cage





Instrumental Quirúrgico

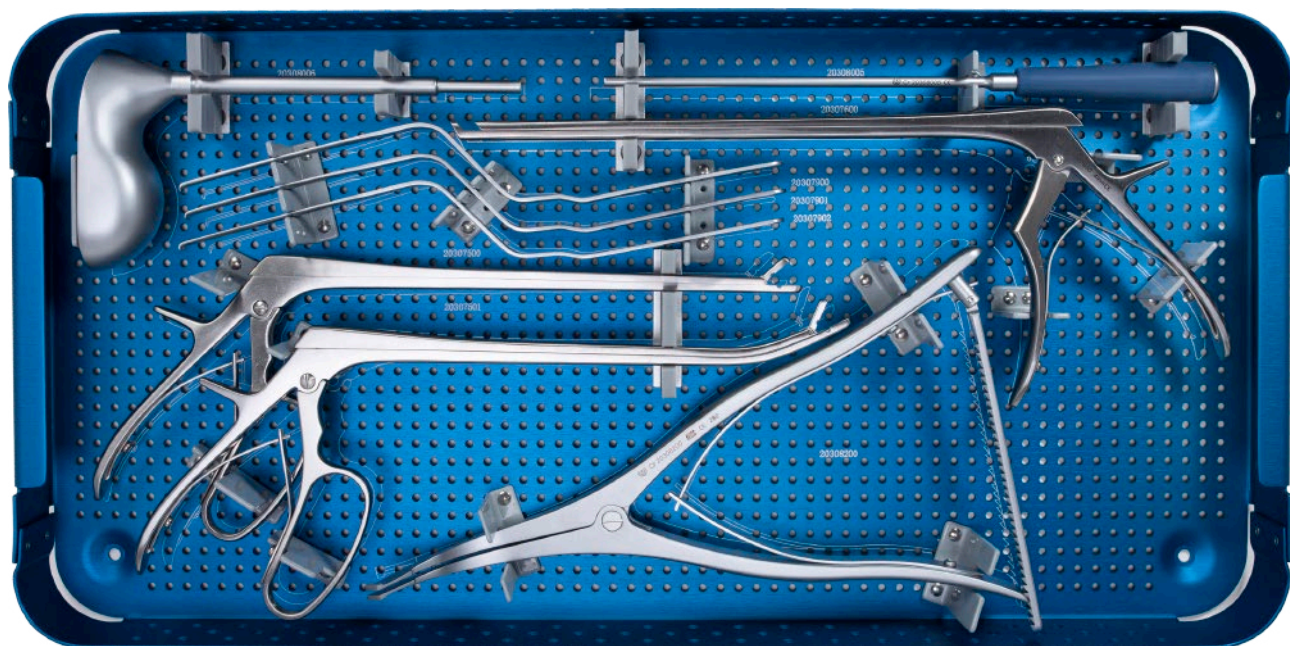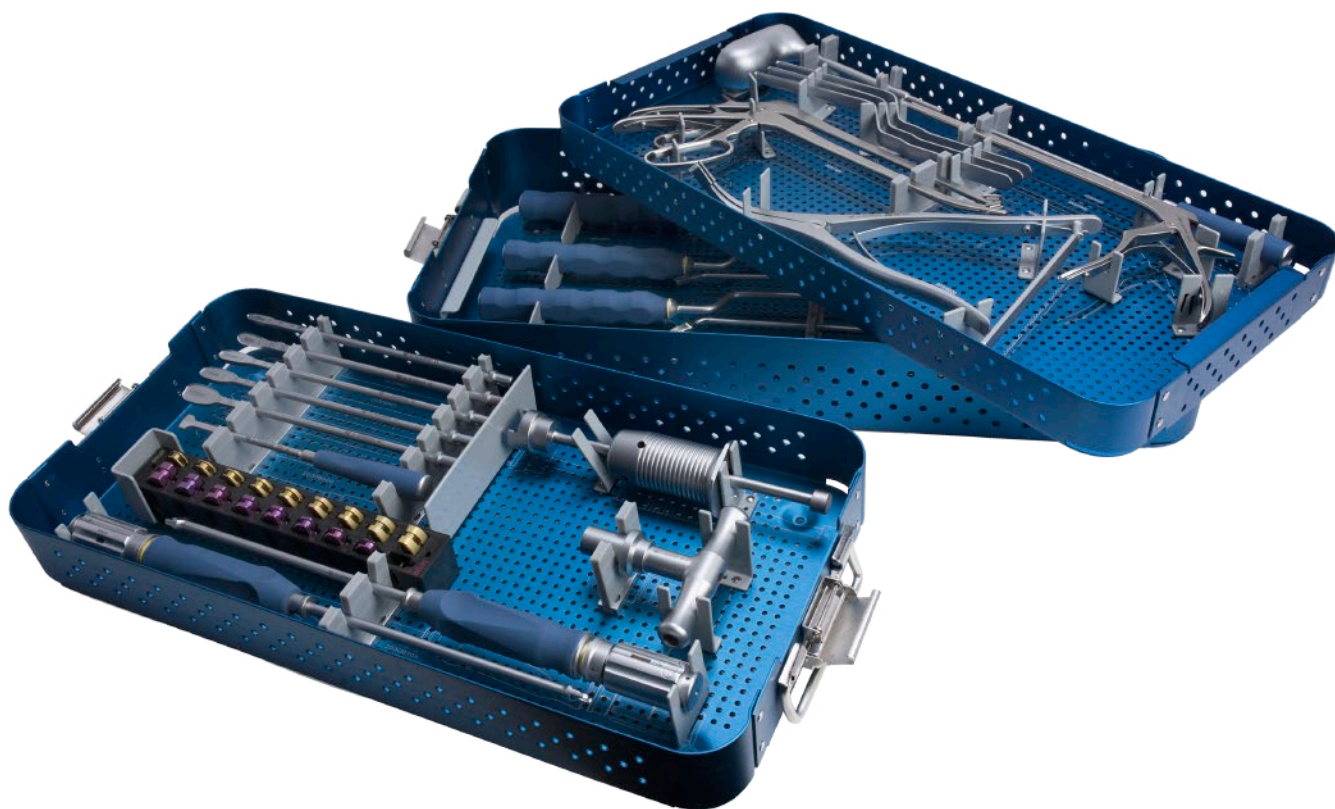

# TLIF Cage



## Instrumental Quirúrgico

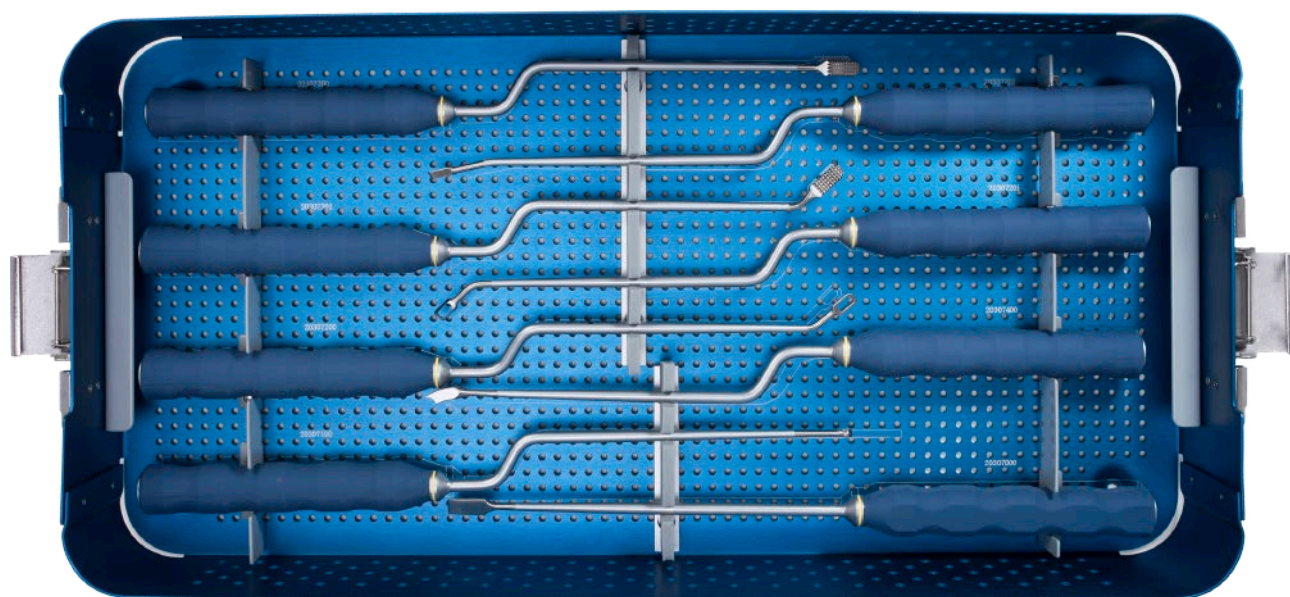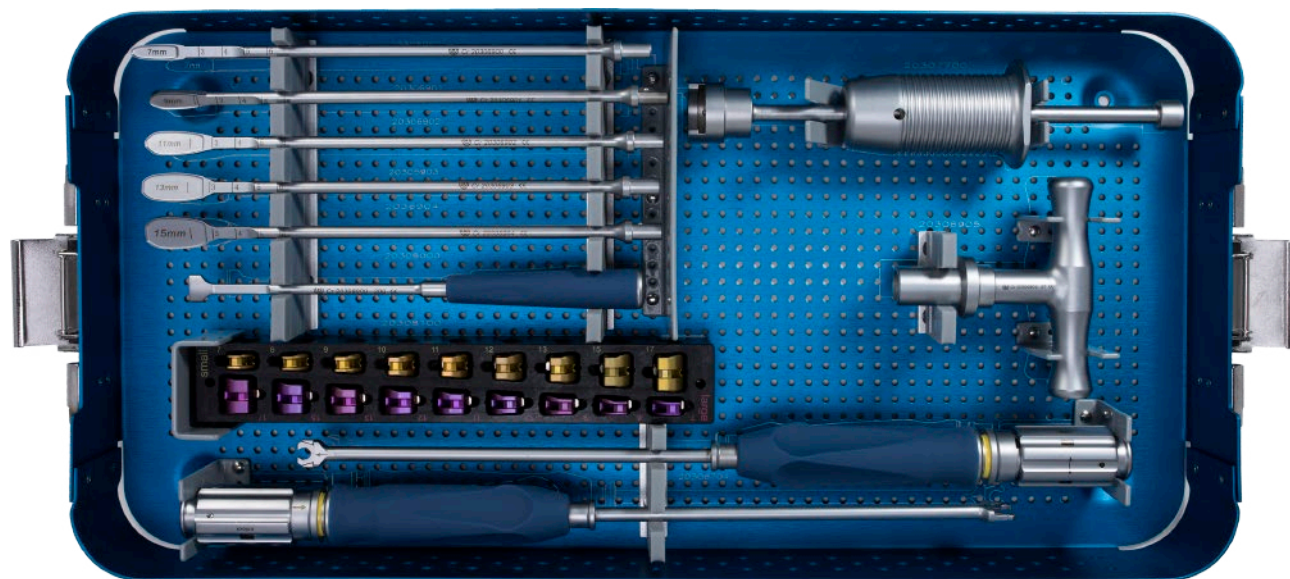



Desde nuestra sede operativa en Estados Unidos, y filiales en México, Argentina, Bolivia y Chile, ofrecemos las gamas más completas para trauma, columna, cadera y rodilla.



Nuestros dispositivos cumplen con las certificaciones de calidad y registros sanitarios vigentes en cada país. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Con más de 8 años dedicados a la importación y comercialización de dispositivos médicos, nos destacamos por nuestro servicio, productos de eficiencia clínica y costos competitivos. Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el distribuidor más cercano a su ubicación.



USA  
1001 N Federal Hwy  
S. 355, Hallandale Beach  
FL 33009  
+1786 375 3968  
bioadvanceusa.com

CDMX  
Amores 1322  
Colonia del Valle Centro  
CP 03100, CDMX  
+52 55 5925 5323  
bioadvance.com.mx

GUADALAJARA  
Av. Patria 179. Of. 302 y 303, Piso 3  
CP. 45030. Col. Prados Guadalupe  
Zapopan, Jalisco  
+52 33 1656 4268  
bioadvance.com.mx

ARGENTINA  
Cnel. Cetz 336, Piso 2  
Martínez, B1642  
Buenos Aires  
+54 11 4765 5995  
bioadvance.com.ar

BOLIVIA  
Calle Pedro Rodríguez 3830  
Santa Cruz de la Sierra  
Bolivia  
+59 1 7048 5050  
bolivia.bioadvanceusa.com

CHILE  
Av. Alonso de Cordova 5870  
Of. 1711, 7560885  
Santiago de Chile  
+56 9 8493 9874  
chile.bioadvanceusa.com



**OVERFIX<sup>®</sup>**  
— SPINE —

**bioadvance**  
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

**MÉXICO**

[bioadvance.com.mx](http://bioadvance.com.mx)

**ARGENTINA**

[bioadvance.com.ar](http://bioadvance.com.ar)

**BOLIVIA**

[bolivia.bioadvanceusa.com](http://bolivia.bioadvanceusa.com)

**CHILE**

[chile.bioadvanceusa.com](http://chile.bioadvanceusa.com)