



OVERFIX[®]

— SPORTS MEDICINE — *by Delta*

X-LOCK[®] SUTURE ANCHOR

ANCLA DE FIJACIÓN DE PEEK CON O SIN SUTURA | PEEK SUTURE ANCHOR OVERFIX

ANCLA DE FIJACIÓN DE TITANIO CON O SIN AGUJA | TITANIUM SUTURE ANCHOR OVERFIX

X-LOCK® SUTURE ANCHOR

Ancla de PEEK con Sutura Totalmente Roscada

Consultar disponibilidad según país o región

CARACTERÍSTICAS

El ancla de PEEK X-Lock está fabricado en Polietere tercetona (PEEK). Combina la excelente biocompatibilidad y bioestabilidad con la propiedad de ser radiolúcida.

Es recomendado un punzón para preparar el orificio en el hueso antes de la inserción. Para hueso duro es recomendable el punzón y el machuelo.



SOLIDEZ

El ancla X-Lock de PEEK provee excelente fuerza de fijación y estabilidad para cirugía artroscópica o técnicas de mini-open.

MATERIAL

El ancla es de material no absorbible para evitar la reacción adversa en tejidos blandos.

PERFIL

La rosca total en el cuerpo del ancla provee una excelente fuerza de Pull-Out y fijación estable para hueso cortical y esponjoso.

APLICACIÓN

En conjunto con las anclas i-Lock sin nudos, X-Lock se puede utilizar para la técnica de doble fila.



X-LOCK® SUTURE ANCHOR

Ancla de Titanio con Sutura Totalmente Roscada

Consultar disponibilidad según país o región

CARACTERÍSTICAS

El ancla de titanio X-Lock está fabricado de aleación de titanio (TC4).

Viene precargado con sutura ultra resistente para garantizar una excelente fuerza de fijación y estabilidad en cirugías artroscópicas o técnicas de mini-open.



DIMENSIONES

Diámetros disponibles en 4.5 mm, 5.5 mm y 6.5 mm

TOTALMENTE ROSCADO

Diseño totalmente roscado para una mayor fuerza de pull-out.

DISEÑO AUTOROSCANTE

El diseño autoroscante facilita la colocación, por lo que se reduce el tiempo intraoperatorio.

SUTURAS PRECARGADAS

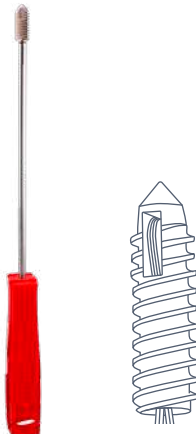
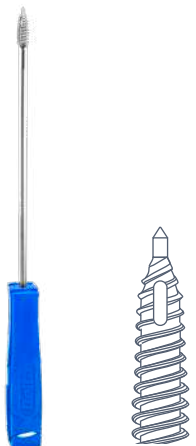
Suturas precargadas dentro del ancla para minimizar el desgaste de la sutura durante la inserción.



X-LOCK® SUTURE ANCHOR

Ancla de PEEK con Sutura | Ancla de Titanio con Sutura Totalmente Roscada

Consultar disponibilidad según país o región

CÓDIGO	DIMENSIONES	APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
Familia X-Lock Suture Anchor Ancla de Peek				
91-7903-003-45	4.5 x 17 mm	Hombro	Ancla de PEEK con Sutura, 4.5 x 17 mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2 Blanca y Blanca-Azul	
91-7903-003-55	5.5 x 17mm	Hombro	Ancla de PEEK con Sutura, 5.5 x 17 mm con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, Blanca y Blanca-Azul	
91-7903-003-65	6.5 x 17 mm	Hombro	Ancla de PEEK con Sutura, 6.5 x 17 mm con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, Blanca y Blanca-Azul	
91-7902-001-02	4.5 x 17 mm	Hombro	Ancla de PEEK con Sutura, 4.5 x 17 mm con 3 Suturas Ultra Resistentes #2, Blanca y Blanca-Azul y Azul	
91-7902-001-01	5.5 x 17 mm	Hombro	Ancla de PEEK con Sutura 5.5 x 17 mm con 3 Suturas Ultra Resistentes #2, Blanca y Blanca-Azul y Azul.	
91-7902-001-06	6.5 x 17 mm	Hombro	Ancla de PEEK con Sutura 6.5 x 17 mm con 3 Suturas Ultra Resistentes #2, Blanca y Blanca-Azul y Azul.	
No. de Registro Sanitario 0246C2025 SSA				
Familia X-Lock Suture Anchor Ancla de Titanio				
91-7901-004-02	4.5 x 19 mm	Hombro	Ancla de Titanio con Sutura, 4.5x19mm, con Sutura Ultra Resistente #2, 1000mm, Blanca-Azul	
91-7901-004-01	4.5 x 19 mm	Hombro	Ancla de Titanio con Sutura, 4.5x19mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul	
91-7901-004-03	5.5 x 19 mm	Hombro	Ancla de Titanio con Sutura, 5.5x19mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul	
91-7901-004-04	6.5 x 20 mm	Hombro	Ancla de Titanio con Sutura, 6.5x20mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul	
No. de Registro Sanitario 0867C2025 SSA				

No. de Registro Sanitario 0246C2025 SSA

No. de Registro Sanitario 0867C2025 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

bioadvance®

— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

OVERFIX®

— SPORTS MEDICINE — *by Delta*



bioadvancelatam.com