



OVERFIX[®]

— SPORTS MEDICINE — *by Delta*

I-LOCK[®] KNOTLESS ANCHOR

ANCLA DE FIJACIÓN DE PEEK CON O SIN SUTURA | PEEK SUTURE ANCHOR OVERFIX

ANCLA DE FIJACIÓN DE TITANIO CON O SIN AGUJA | TITANIUM SUTURE ANCHOR OVERFIX

i-LOCK® KNOTLESS ANCHOR

Ancla de PEEK sin Nudos | Ancla de Titanio Knotless Giratoria | Twist-in

Consultar disponibilidad según país o región

CARACTERÍSTICAS

Las anclas i-Lock pueden utilizarse en lesiones de manguito rotador, reparación de ligamentos colaterales (lateral y medial) y diferentes tipos de lesiones en ligamentos.

El diseño Twist-in provee una inserción simple y rápida además de permitir visualizar y ajustar la tensión de la sutura antes de la implantación final.

El cuerpo vacío del ancla aumenta la fuerza de Pull-Out y facilita el crecimiento de hueso y la fusión ósea.

La ranura para suturas y el mango permite un óptimo manejo de las suturas.


ANCLA DE PEEK

El ancla i-Lock PEEK consta de una punta y un cuerpo totalmente roscado lo que provee al implante de una mejor fuerza de Pull-Out.

ANCLA DE TITANIO

El titanio como material provee de una alta fuerza de Pull-Out para una mejor fijación.

El cuerpo del ancla tiene el diseño de rosca sin filo lo que evita la posibilidad de cortar la sutura.

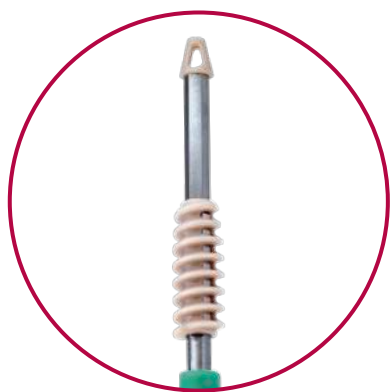

i-LOCK® KNOTLESS ANCHOR

Ancla de PEEK sin Nudos

Roscada | Tap-in

Consultar disponibilidad según país o región

CARACTERÍSTICAS

El ancla de PEEK sin nudos i-Lock, Tap-in fue diseñada para una fuerte resistencia al Pull-Out, lo que le brinda un amplio uso para lesiones de manguito rotador, inestabilidad y diferentes tipos de lesiones de ligamentos.

TENSIÓN

El diseño único de i-Lock permite ajuste de tensión intraoperatoria mientras se asegura la correcta reducción y fijación del tejido.

SECUENCIA

La técnica quirúrgica de i-Lock ahorra pasos y tiempo valioso dentro de la cirugía además con su bajo perfil permite una fijación suave lo que elimina la posibilidad de pinzamiento del nudo.

PERFIL

Mango ergonómico que permite una excelente inserción.



I-LOCK® KNOTLESS ANCHOR

Ancla de PEEK sin Nudos

Ancla de Titanio Knotless

Consultar disponibilidad según país o región

CÓDIGO	DIMENSIONES	APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
Familia I-Lock Suture Anchor Twist In Giratoria				
91-7903-002-47	4.75 x 19 mm	Hombro Rodilla Tobillo	Ancla de PEEK sin Nudos, Giratoria, 4.75 x 19 mm con Sutura Ultra Resistente #2, Blanca-Azul	  Ancla de Titanio  Ancla de Peek
91-7903-002-55	5.5 x 19 mm	Hombro Rodilla Tobillo	Ancla de PEEK sin Nudos, Giratoria, 5.5 x 19 mm con Sutura Ultra Resistente #2, Blanca-Azul	
91-7901-005-01	4.75 x 24.5 mm	Hombro Rodilla Tobillo	Ancla de Titanio Knotless, Twist-in, 4.75x24.5mm, con Sutura Ultra Resistente #2, 1000mm, Blanca-Azul	

No. de Registro Sanitario 0246C2025 SSA

Familia I-Lock Suture Anchor Tap In Roscada				
91-7906-000-25	2.5 x 8 mm	Hombro Rodilla Tobillo	Ancla de PEEK sin Nudos, Roscada, 2.5 x 8 mm	  Ancla de Titanio  Ancla de Peek
91-7903-001-30	3.0 x 16 mm.	Hombro Rodilla Tobillo	Ancla de PEEK sin Nudos, Roscada, 3.0 x 16 mm	
91-7903-001-35	3.5 x 19 mm	Hombro Rodilla Tobillo	Ancla de PEEK sin Nudos, Roscada, 3.5 x 19 mm.	
91-7903-001-45	4.5 x 24 mm	Hombro Rodilla Tobillo	Ancla de PEEK sin Nudos, Roscada, 4.5 x 24 mm.	

No. de Registro Sanitario 0246C2025 SSA


BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

bioadvance®

— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

OVERFIX®

— SPORTS MEDICINE — by Delta

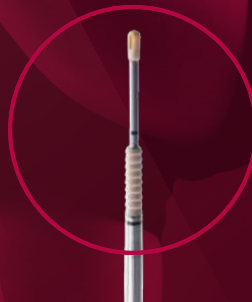

bioadvancelatam.com