



OVERFIX®

— SPORTS MEDICINE — *by Delta*

T-LOCK® MENISCAL REPAIR SYSTEM

DISPOSITIVO DE REPARACIÓN DE MENISCOS | ALL-INSIDE MENISCAL REPAIR SYSTEM OVERFIX

T-LOCK® MENISCAL REPAIR SYSTEM

Dispositivo de Reparación de Meniscos Cigar Handle Curvo

Consultar disponibilidad según país o región

CARACTERÍSTICAS

DESPLIEGUE DE IMPLANTES

Contiene un despliegue activo de dos implantes de PEEK de perfil ultra bajo, los cuales son expulsados desde la punta de la aguja de administración, minimizando la penetración excesiva del menisco. El implante está integrado en una aguja T1 de 1.0mm que ayuda a minimizar la lesión del menisco. La aguja curva de 10° está diseñada para que proporcione un fácil acceso al desgarro.



ERGONOMÍA

El ergonómico mango de cigarro y el activo control deslizante de 360° está diseñado para una sola mano. Entrega del implante en cualquier rotación.


AJUSTABLE

El botón de profundidad puede ser rápidamente ajustado a diferentes longitudes, según el grosor del menisco.



SUTURA PRECARGADA

Precargado con sutura de fibra UHS #2-0 y nudo deslizante proporciona reparación artroscópica segura de todo el interior del menisco.

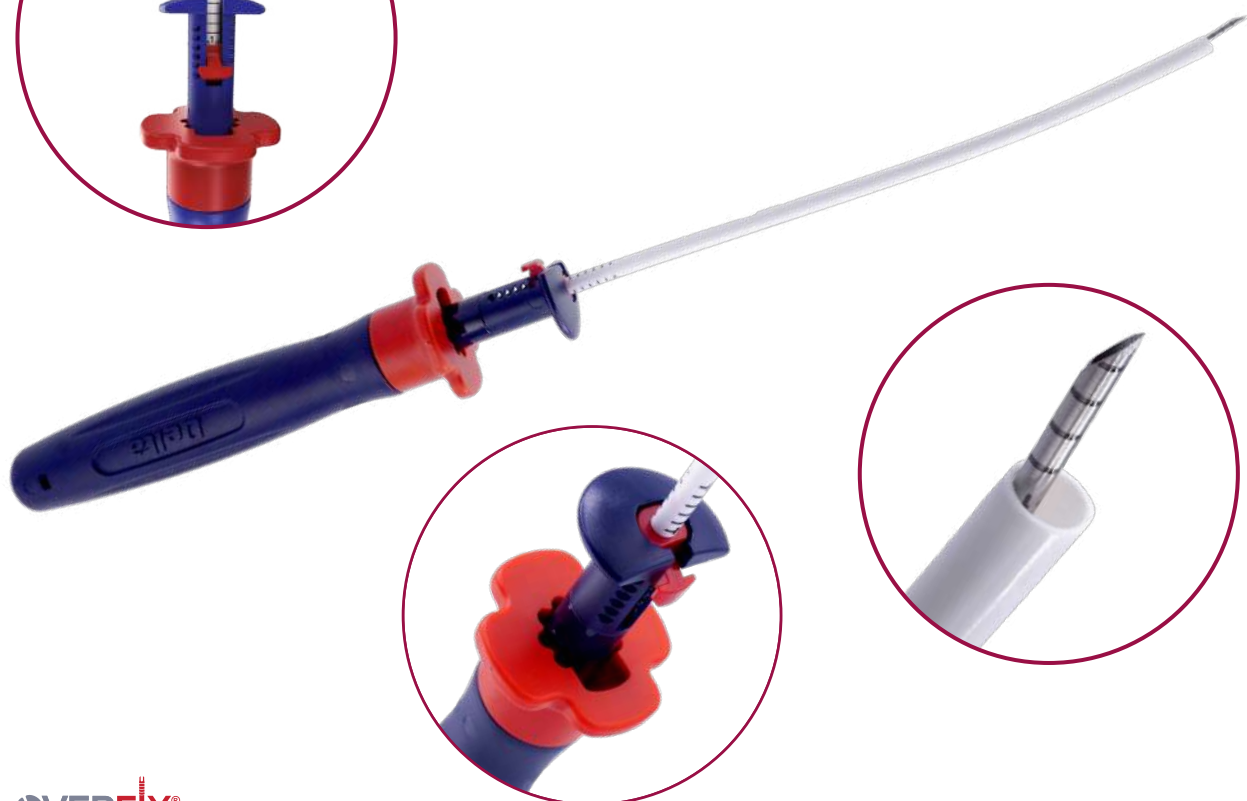

T-LOCK® MENISCAL REPAIR SYSTEM

Dispositivo de Reparación de Meniscos Cigar Handle Curvo

Consultar disponibilidad según país o región

CÓDIGO	DIMENSIONES	APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
FixButton con Loop Ajustable Sin Reforzar				
91-8901-002-00	--	Rodilla	Sistema de Reparación de Meniscos, Cigar Handle, Curvo	

No. de Registro Sanitario 1386C2025 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

bioadvance®

— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

OVERFIX®

— SPORTS MEDICINE — by Delta



bioadvancelatam.com